

Маркер длин ДНК 1 kb

Кат. # NL001

Версия 2 от 7 сентября 2023 г.

Маркер длин ДНК 1 kb — стандарт для определения длины двухцепочечных молекул ДНК в диапазоне от 250 до 10 000 п.о. в агарозном геле.

«DNA Ladder 1 kb» может быть использован для приблизительной оценки массы фрагмента ДНК в образце путем сравнения интенсивности полос одинаковой длины.

«4X Gel Loading Dye, Blue» предназначен для нанесения маркера длин и исследуемых образцов на гель.

Только для использования в научно-исследовательских целях.

Состав

Компонент	Количество
DNA Ladder 1 kb	200 мкл (200 нг/мкл)
4X Gel Loading Dye, Blue	1.5 мл

Условия хранения и транспортировки

Хранение: при -20°C .


После растворения в «4X Gel Loading Dye, Blue» хранить при $+4^{\circ}\text{C}$ не более 3 недель или при -20°C не более 3 месяцев.

Транспортировка: при комнатной температуре.

Срок годности: 12 месяцев с даты поставки при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Основные характеристики

- Состоит из 13 фрагментов ДНК длиной в диапазоне от 250 до 10 000 п.о.
- Фрагменты 1 000 и 3 000 п.о. имеют повышенную концентрацию и могут быть легко идентифицированы на геле.
- Количество маркера длин ДНК: 40 мкг.

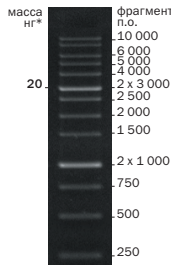

* Визуализация маркера «DNA Ladder 1 kb» (125 нг на дорожку) с помощью электрофореза в 1.3% TAE агарозе.

Протокол

1. Приготовьте рабочий раствор маркера длин ДНК — 25 нг/мкл:

х мкл	DNA Ladder 1 kb;
2х мкл	4X Gel Loading Dye, Blue;
5х мкл	Вода деионизированная.

▶ Рекомендуется разделить маркер на аликвоты и использовать их для приготовления рабочего раствора.

2. Для проведения гель-электрофореза используйте 2–5 мкл рабочего раствора маркера (50–125 нг/лунку).

▶ Рекомендуется использовать гель с концентрацией агарозы 1–2% (1X TAE электродный буфер).

▶ Не рекомендуется использовать маркер для электрофореза в полиакриламидном геле.

3. Для нанесения исследуемых образцов на гель смешайте образец и «4X Gel Loading Dye, Blue» в соотношении 1:3.

Возможно приобрести дополнительно

Кат. #	Продукт	Количество
PB022	50X TAE электродный буфер	100 мл
PB122		1 л
PB207S		7.5 мл (5 x 1.5 мл)
PB207M	Вода деионизированная, свободная от нуклеаз	50 мл
PB207L		1 л

ЗАО Евроген

Москва 117997

ул. Миклухо-Маклая 16/10, к. 15

Тел.: +7 (495) 784-7084

order@evrogen.ru

www.evrogen.ru